



LABORATORIO DE **SIMULACIÓN, CLÍNICA**

Simuladores de alta, mediana y baja fidelidad que permiten las prácticas de atención de paciente adulto, pediátrico y neonato en la atención de emergencias, cuidado crítico, ALS, BLS, así como prácticas de destrezas y habilidades clínicas

SIMULADORES DE ALTA FIDELIDAD

(ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATO)
SafeGuard / Simbodies



(+51) 452-3328
986 295 776



contacto@warem.pe



Av. Parque de Las Leyendas
Nº210 - Of. 1001
San Miguel, Lima - Perú



SIMBODIES®

ENTRENADORES MANIQUÍ

PART OF SAFEGUARDMEDICAL™

CONTENIDO

Sobre nosotros	04
Sectores	05
Maniqués médicos SIMBODIES	06
ADULTO	
Maniqué de entrenamiento de toracotomía Pro	08
Maniqué avanzado de vía aérea quirúrgica	12
Maniqué masculino avanzado	14
Maniqué femenino avanzado	16
Maniqué masculino estándar	18
Maniqué femenino estándar	20
PEDIÁTRICO	
Maniqué infantil avanzado (9-10 años)	22
Maniqué de niño estándar (9-10 años)	24
Maniqué infantil avanzado (5-6 años)	26
Maniqué Infantil Avanzado	28
Maniqué de pretérmino (28 semanas)	30
SIN VIDA	
Maniqués estándar chorreados	32
Maniqués estándar quemados	33
SIMBODIES Kits compatibles con maniqués médicos	34
Kit de reparación de toracotomía	35
Procedimientos médicos de un vistazo	36
Personalizaciones de un vistazo	38
ENTRENADORES MANIQUÍ	
Entrenador de medio cuerpo Pro Thoracotomy	40
Habilidades médicas de emergencia : entrenador de torso (entrenador EMS-T)	42
Preguntas Frecuentes	46
Garantía SIMBODIES	48
Paquetes de servicios SIMBODIES	50

SOBRE NOSOTROS

LA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO MÁS REALISTA

Los modelos Advanced y Pro permiten una simulación hiperrealista de una gran variedad de tratamientos, incluidos los procedimientos quirúrgicos, mientras que los maniqués estándar admiten una importante formación básica para salvar vidas (consulte las páginas 36 y 37 para obtener un desglose completo de los procedimientos médicos).

LAS SIMULACIONES MÁS REALES

Nuestras simulaciones extraordinariamente realistas e inmersivas ofrecen el más alto nivel de soporte de capacitación para médicos en todo el espectro de atención traumatológica.

SIMULACIONES AVANZADAS

Desde el principio, hemos sido pioneros en técnicas innovadoras de simulación médica, e incluso hemos introducido la formación en simulación en profesiones en las que nunca antes se había utilizado. Hemos llevado los beneficios de la vida, como la capacitación sin pacientes, a los médicos en todos los niveles de práctica, en todo el mundo. Como resultado de nuestro trabajo pionero, brindado constantemente los mejores recursos de capacitación, SIMBODIES se ha convertido en una marca reconocida internacionalmente.

PRECISIÓN CLÍNICA

Existimos porque creemos que la forma más efectiva de mejorar la confianza clínica es a través de la experiencia. Involucramos a algunos de los principales expertos clínicos del mundo en el desarrollo de nuestras soluciones de capacitación, para asegurarnos de que la experiencia se sienta lo más cerca posible de tratar a un paciente real. Desde una precisión anatómica excepcional y respuestas realistas en los maniqués médicos SIMBODIES, hasta un control preciso de la presión arterial y la frecuencia cardíaca simuladas en cadáveres perfundidos con TruSim.

LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS

Usamos una combinación de técnicas patentadas y estándar de la industria para ofrecer ayudas de entrenamiento increíbles. Nuestro equipo de producción de SIMBODIES trabaja con una atención excepcional al detalle, creando maniqués, mangas, trajes y heridas a mano con esmero. Y nuestro proceso riguroso y respetuoso para la selección de tejidos garantiza la mejor calidad y longevidad posibles de cada cadáver TruSim.

GARANTÍA ESTÁNDAR DEL DIAMANTE SIMBODIES

Estamos verdaderamente seguros de que estará satisfecho con su producto SIMBODIES y que estará de acuerdo en que su producto es una imitación exacta de la anatomía humana que necesita replicar. Es por eso que cada producto SIMBODIES tiene una garantía limitada de 12 meses. Si encuentra que su producto SIMBODIES no cumple con nuestros altos estándares habituales, comuníquese con nosotros. Trabajaremos con usted para hacerlo bien.

SECTORES



EMS

Cree ejercicios y entornos inmersivos para ayudar a los equipos de EMS a capacitarse y mantenerse actualizados en el tratamiento de traumatismos que salvan vidas, utilizando simulaciones realistas de una amplia gama de lesiones.



MILITAR

Permita que los capacitadores enseñen y los médicos aprendan, practiquen y repitan procedimientos de trauma de alto riesgo de una manera de bajo riesgo, con simulaciones increíblemente duraderas y realistas.



POLICÍA

Entrene a los salvavidas de la policía para que tomen la acción correcta hasta que los profesionales médicos lleguen a la escena, utilizando maniqués realistas con capacidades clínicas mejoradas.



FORENSE DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Ofrezca un realismo inigualable y escenarios inmersivos para equipos forenses desarrollando sus habilidades, con simulaciones de cadáveres, cuerpos quemados o volados, y heridas irreversibles.



CUIDADOS AGUDOS

Ayude a los profesionales de cuidados intensivos a mantenerse en la cima de su juego con capacitación realista en muchos procedimientos clínicos diferentes, utilizando cadáveres perfundidos, maniqués de cuerpo completo, heridas de simulación y mangas.



EDUCADORES MÉDICOS

Proporcione a los estudiantes las mejores herramientas posibles para respaldar su experiencia de formación médica y prepárelos para emergencias de salud de la vida real con simulaciones de última generación.



MANIQUÍES MÉDICOS SIMBODIES

Nuestros maniquíes son simuladores de pacientes hiperrealistas, utilizados por educadores y médicos para la formación médica.

LA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO MÁS REALISTA

Los modelos Advanced y Pro permiten una simulación increíblemente realista de una gran variedad de tratamientos, incluidos los procedimientos quirúrgicos, mientras que los maniquíes estándar admiten una importante formación básica para salvar vidas (consulte las páginas 36 y 37 para obtener un desglose completo de los procedimientos médicos).

POR FAVOR ESPECIFIQUE CUIDADOSAMENTE

Las funciones de procedimiento están literalmente integradas en cada maniquí, y cada una se fabrica exactamente según las especificaciones. Cuando realiza un pedido, es importante asegurarse de que sus especificaciones cubran todas las funciones que necesitará. Actualmente no hay forma de mejorar o alterar las capacidades clínicas después de la fabricación.

Hay personalizaciones limitadas disponibles, comuníquese con el equipo para obtener más información.

**Los maniquíes sin vida se pesan con precisión, con superficies de piel realistas apropiadas para su propósito, es decir, quemados o quemados.*

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO

Diseñamos y creamos maniquíes médicos para replicar la apariencia de un paciente real. Utilice opciones personalizables para maniquíes que brinden la experiencia más realista posible para su contexto de capacitación. Todos los maniquíes están contruidos alrededor de una estructura de acero con varios niveles de articulación para el posicionamiento del paciente durante el entrenamiento.

Los SIMBODIES Pro se fabrican a partir de siliconas de grado protésico realistas, utilizando varios procesos innovadores para producir variaciones en la sensación y la funcionalidad, incluidas siliconas pegajosas, blandas y más resistentes que mejoran el realismo, la usabilidad y la capacidad de reparación del maniquí.

Aparte de nuestra gama Lifeless*, cada modelo incluye estas características humanas cuidadosamente diseñadas:

PIEL

La piel del maniquí SIMBODIES tiene una apariencia realista y responde al movimiento y la manipulación. La superficie de la piel es a prueba de salpicaduras, duradera y fácil de lavar. También es compatible con los kits SIMBODIES Moulage. Dependiendo del modelo, los maniquíes médicos se pueden especificar en tonos de piel claros, medios u oscuros, y se pueden personalizar con características de identificación como marcas de nacimiento y tatuajes.

OJOS

Todos nuestros maniquíes realistas cuentan con ojos parcialmente abiertos de forma predeterminada, con cejas y pestañas realistas. Las tapas se pueden abrir manualmente, revelando un globo ocular en el 'socket' completo con detalles en blanco, iris y pupila.

Elija el color de ojos apropiado cuando especifique su maniquí.

PELO


Todos los maniquíes de adultos y pediátricos SIMBODIES están equipados con pelucas de cabello humano de alta calidad. Nuestros modelos para bebés tienen el cabello perforado a mano para lograr una apariencia increíblemente realista, y los maniquíes para adultos también cuentan con el cabello perforado a mano en el cuerpo. Se encuentra disponible una gama de colores, longitudes y texturas de cabello para elegir.

EXTREMIDADES Y MOVIMIENTO

Todos los brazos y piernas del maniquí se pueden mover parcialmente en las articulaciones, excepto en los hombros, que son fijos. Cada maniquí tiene manos y pies fijos completos con uñas realistas.

ANATOMÍA

Los maniquíes de todos los rangos de edad se construyen con genitales masculinos o femeninos (los maniquíes adultos solo pueden equiparse con capacidades de cateterismo si se especifica). Los maniquíes femeninos adultos también tienen senos de tejido blando realistas.

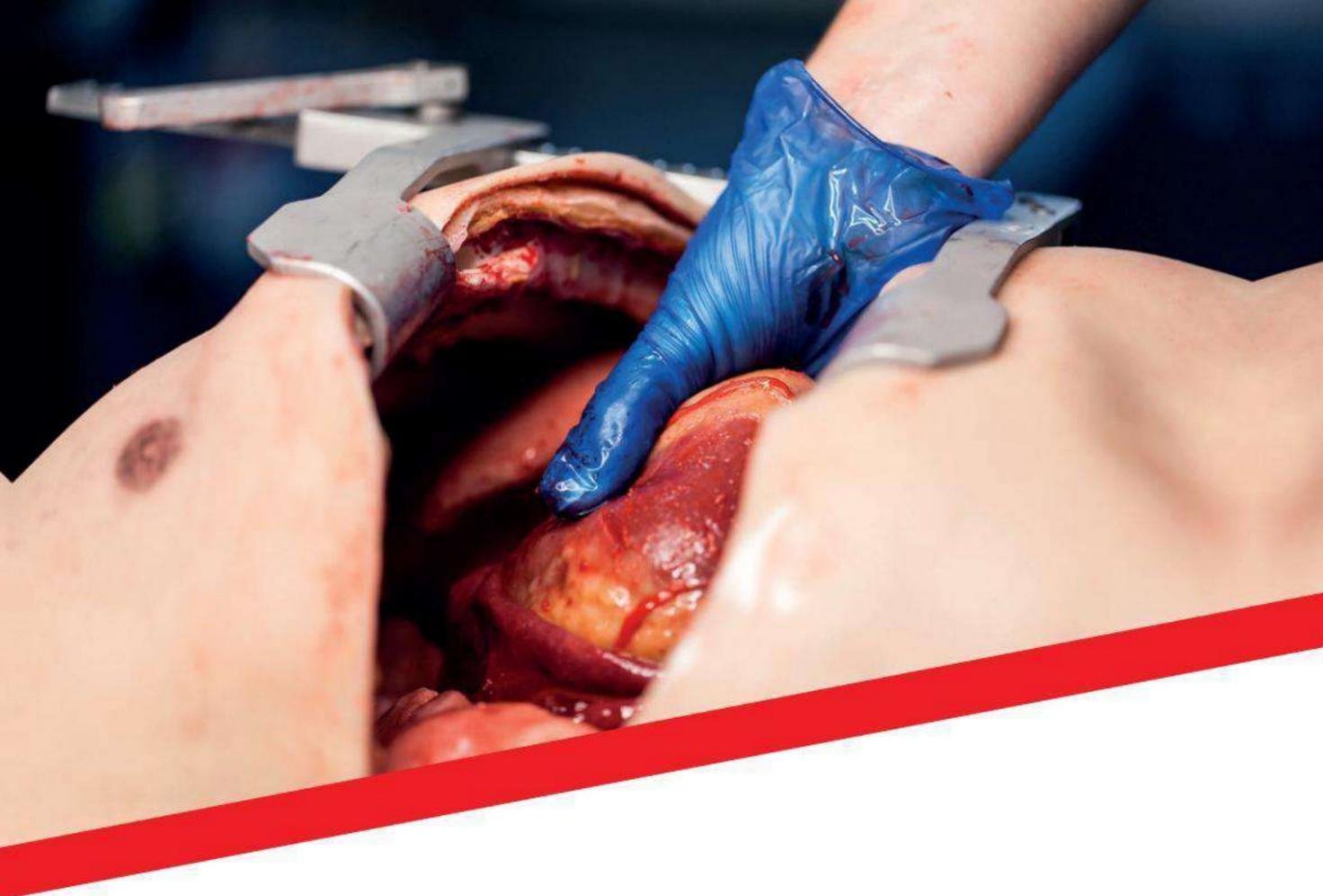

ENTRENADOR PRO TORACOTOMÍA MANIQUÍ MASCULINO ADULTO

El SIMBODIES Pro Thoracotomy Trainer es un maniquí de procedimiento, reparable y operable. Esta innovadora ayuda brinda nuevas opciones de capacitación inmersiva para educadores y profesionales de la atención médica de emergencia. Adaptable, portátil y realista, este maniquí brinda oportunidades de capacitación quirúrgica en una variedad de entornos de emergencia desafiantes. Se puede cortar, operar y suturar con equipo quirúrgico estándar.

Pro SIMBODIES tiene un sistema vascular anatómicamente preciso que incluye el corazón, los pulmones y la caja torácica, y una vía aérea que se puede intubar y ventilar. Las vías respiratorias, la boca y la mandíbula son anatómicamente correctas, moldeadas a partir de un cadáver, lo que crea un dispositivo de entrenamiento hiperrealista y realista. Esto permite a los estudiantes practicar los drenajes torácicos y la colocación de tubos orotraqueales, máscaras laríngeas, tubos traqueales esofágicos, tubos nasotraqueales, tubos nasofaríngeos, tubos endotraqueales y vías respiratorias Guedel.

El corazón que late (bombeado manualmente) y el pericardio pueden simular un taponamiento cardíaco realista y se puede acceder a ellos a través de una toracotomía en forma de concha completamente reparable.

“Genial que todo sea como esperarías en un humano. Fue genial poder practicar toracotomías”.

Miembro del personal del Hospital Docente de Milton Keynes



REPARABLE, REEMPLAZABLE, REPETIBLE

El entrenador de toracotomía Pro tiene muchas características reparables y reemplazables. Cada maniquí se suministra con un kit completo de materiales y equipos para ayudar a mantenerlo en buen estado y permitir que los procedimientos se realicen una y otra vez.

- Piel del tórax reparable y reemplazable con tejido graso integrado (se suministran 3)
- Área suave y pegajosa para adherir la piel del tórax de reemplazo en su lugar
- Tejido del quinto espacio intercostal reemplazable (se suministran 20)
- Inserto de esternón reemplazable en el quinto espacio intercostal (se suministran 20)
- Saco de pericardio reparable y reemplazable con nervios frénicos (se suministran 8)

Consulte la página 35 para conocer el contenido completo del kit de reparación de toracotomía.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos automáticos)
- Segmento de esternón recortable y reemplazable
- Descompresión con aguja en los sitios intercostales segundo y quinto
- Toracostomía bilateral de los dedos (solo en el quinto sitio intercostal)
- Inserción de drenaje torácico (solo en el quinto sitio intercostal)
- Sistema vascular anatómico realista de silicona que incluye corazón, pulmones y aorta
- Bomba de aire manual para simular un gasto cardíaco
- La bomba de sangre manual suministra sangre al corazón y a la herida permanente en el ventrículo izquierdo
- Manejo de hemorragias y reparación de una herida en la pared del corazón: se pueden usar suturas y grapas. insertado y eliminado.
- Incisión del pericardio para liberar el taponamiento cardíaco
- Sitios intraóseos (IO) llenos de sangre
- La infusión intraósea (IO) en la cabeza humeral y la tibia puede ser impulsada por impacto o potencia en la médula ósea simulada, lo que permite el inconveniente

Características del cuerpo

	Género	Hombre 30-40 años
	Altura	5'10"
	Peso	Aprox. 45kg
	Color de ojos	● ●
	Color de pelo	●
	Tono de piel	●
	Talla de ropa	ML
	Tamaño del zapato	Reino Unido 10,5





CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés) que incluyen moldes humanos precisos vía aérea de cadáver
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- Capacidad de cricotirotomía con aguja
- Capacidad de cricotirotomía percutánea
- La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos automáticos)
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)
- Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia



MANIQUÍ AVANZADO DE VÍA AÉREA QUIRÚRGICA

Ofrezca capacitación en tratamiento y gestión de vías respiratorias complejas verdaderamente realista con el maniquí avanzado de vías respiratorias quirúrgicas. Disponible en modelos masculinos o femeninos anatómicamente correctos, este maniquí admite cricotiroidotomía, ventilación, descompresión con aguja y RCP.

Las extremidades parcialmente articuladas y la distribución precisa del peso simulan lo que es mover y manejar a un paciente vivo, y las técnicas de fabricación avanzadas utilizan diferentes tipos de silicona para emular diferentes texturas de piel y tejido alrededor del cuerpo.

El maniquí avanzado de vía aérea quirúrgica tiene características reparables y reemplazables. Cada maniquí se suministra con un kit de materiales y equipos para ayudar a mantenerlo en buen estado y permitir que los procedimientos se lleven a cabo una y otra vez.

Consulte la página 34 para conocer todos los detalles del kit.

Características del cuerpo

	Género	Mujer 20-30 años / Hombre 30-40 años
	Altura	Hembra 5'7" / Macho 6'
	Peso	Hembra aprox. 30kg / Macho aprox. 35kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	Mujer M / Hombre ML
	Tamaño del zapato	Reino Unido femenino 8 / Reino Unido masculino 11.5



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado con precisión
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica.
- La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales y la RCP (no apto para dispositivos automáticos).
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo y quinto espacio intercostal, línea medioclavicular (frontal)
- Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia



MANIQUÍ MASCULINO ADULTO AVANZADO

Ofrezca a los alumnos una formación verdaderamente realista en procedimientos que salvan vidas, como ventilación, descompresión con aguja y RCP.

Este maniquí masculino avanzado simula hasta el más mínimo detalle a un hombre adulto de 30 a 40 años.

Fabricado con siliconas de grado protésico con diferentes características para simular con precisión varias texturas alrededor del cuerpo humano, este maniquí realista es anatómicamente correcto con extremidades parcialmente articuladas y una distribución precisa del peso.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Características del cuerpo

	Género	Hombre 30-40 años
	Altura	6'
	Peso	Aprox. 35kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	ML
	Tamaño del zapato	Reino Unido 11,5



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado con precisión
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica.
- La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales y la RCP (no apto para dispositivos automáticos).
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frontal)
- Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia



MANIQUÍ FEMENINO ADULTO AVANZADO

Facilite la educación y la práctica repetible de procedimientos como ventilación, descompresión con aguja y RCP con este maniquí realista.

Simulando a una mujer adulta de 20 a 30 años, el maniquí femenino avanzado ofrece una experiencia hiperrealista de mover, manejar y tratar a un paciente.

El maniquí está hecho de diferentes tipos de silicona de grado protésico para simular con precisión diferentes texturas alrededor del cuerpo. Cada uno es anatómicamente correcto, con una distribución precisa del peso y extremidades parcialmente articuladas.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Características del cuerpo

	Género	Mujer 20-30 años
	Altura	5'7"
	Peso	Aprox. 30kg
	Color de ojos	  
	Color de pelo	 
	Tono de piel	  
	Talla de ropa	M, talla de sujetador 36C
	Tamaño del zapato	Reino Unido 8



MANIQUÍ MASCULINO ADULTO ESTÁNDAR

Simule una víctima real en situaciones de emergencia escenificadas y entrenamiento con este maniquí estándar realista. Pesado con precisión en las extremidades y el torso, tiene un impacto real en los entornos educativos.

Los maniqués estándar, elaborados con silicona de platino de grado protésico y seguro para la piel, tienen la apariencia, el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto con pelucas de cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que funcionan, SIMBODIES ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Las capacidades de entrenamiento incluyen práctica en estabilizar, manejar y mover al paciente. Para obtener una lista completa de los procedimientos de capacitación en diferentes modelos, consulte la página 36.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.



CARACTERÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO


- Aplicación de vendaje pélvico
- Aplicación de estabilización manual en línea
- Aplicación de torniquete
- Aplicación de varios apósitos
- Mover al paciente
- Desvestir al paciente
- Baño en la cama del paciente

Características del cuerpo

	Género	Hombre 30-40 años
	Altura	6'
	Peso	Aprox. 35kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	ML
	Tamaño del zapato	Reino Unido 10,5



CARACTERÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO

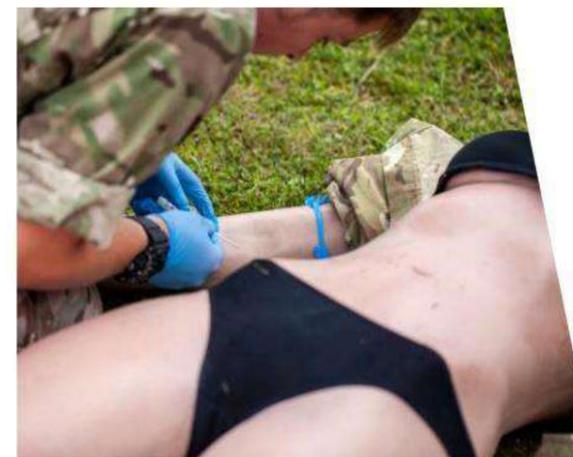

- Aplicación de vendaje pélvico
- Aplicación de estabilización
- Aplicación de un collarín espinal
- Aplicación de torniquete
- Aplicación de varios apósitos
- Mover al paciente
- Desvestir al paciente
- Baño en la cama del paciente

MANIQUÍ FEMENINO ADULTO ESTÁNDAR

Prepare a los médicos para situaciones de emergencia con una herramienta de formación realista que simula a un paciente real. Nuestro maniquí estándar femenino se pesa con precisión con características corporales realistas y capacidades clínicas útiles.

Los maniqués estándar, elaborados con silicona de platino de grado protésico y seguro para la piel, tienen la apariencia y el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto con pelucas de cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que funcionan, SIMBODIES ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Utilice este dispositivo de calidad para practicar el movimiento, la estabilización y el manejo del paciente. Para obtener una lista completa de los procedimientos de capacitación en diferentes modelos, consulte la página 36.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Características del cuerpo

	Género	Mujer 20-30 años
	Altura	5'7"
	Peso	Aprox. 30kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	M, talla de sujetador 36C
	Tamaño del zapato	Reino Unido 8



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias esculpidas anatómicamente correctas
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos automáticos)
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)
- Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia



MANIQUÍ NIÑO AVANZADO (EDAD 9-10)

Prepare a los médicos para situaciones de emergencia con una herramienta de formación realista que simula a un paciente real. Nuestro maniquí estándar femenino se pesa con precisión con características corporales realistas y capacidades clínicas útiles.

Los maniqués estándar, elaborados con silicona de platino de grado protésico y seguro para la piel, tienen la apariencia y el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto con pelucas de cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que funcionan, SIMBODIES ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Utilice este dispositivo de calidad para practicar el movimiento, la estabilización y el manejo del paciente. Para obtener una lista completa de los procedimientos de capacitación en diferentes modelos, consulte la página 36.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Características del cuerpo

	Género	Mujer / Hombre 9-10 años
	Altura	4'2"
	Peso	Aprox. 15kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	9-10 años
	Tamaño del zapato	Reino Unido 1.5



MANIQUÍ NIÑO ESTÁNDAR (EDAD 9-10)

El maniquí estándar para niños SIMBODIES ofrece una herramienta valiosa para los educadores clínicos que preparan médicos para emergencias pediátricas.

Con un peso exacto de alrededor de 15 kg y un aspecto y tacto increíblemente realistas, este maniquí ayuda a dar una sensación hiperrealista de cómo es manejar el tratamiento de trauma pediátrico y los diferentes desafíos en comparación con el tratamiento de adultos.

Ofrece oportunidades para practicar la estabilización, el manejo y el movimiento del paciente.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.



CARACTERÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO

- Aplicación de vendaje pélvico
- Aplicación del manual, estabilización en línea
- Aplicación de un collarín espinal
- Aplicación de torniquete
- Aplicación de varios apósitos
- Mover al paciente
- Desvestir al paciente
- Baño en la cama del paciente

Características del cuerpo

	Género	Mujer / Hombre 9-10 años
	Altura	4'2"
	Peso	Aprox. 15kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	9-10 años
	Tamaño del zapato	Reino Unido 1.5



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias esculpidas anatómicamente correctas
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos automáticos)
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)
- Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia



MANIQUÍ NIÑO AVANZADO (EDAD 5-6)

Es fundamental ayudar a los médicos y aprendices a experimentar y comprender los matices de la atención pediátrica.

Este maniquí infantil avanzado hiperrealista simula a un paciente de 5 años y se puede especificar con genitales masculinos o femeninos. Varios tipos diferentes de silicona de grado protésico recrean diferentes texturas y consistencias alrededor del cuerpo para brindar sensaciones reales y retroalimentación física durante el tratamiento.

Los maniqués para niños avanzados ofrecen capacidades clínicas como descompresión con aguja, RCP e intubación y ventilación. Las extremidades se pesan proporcionalmente y están parcialmente articuladas, para una experiencia realista de trabajar con un paciente joven.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente. Los maniqués con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Características del cuerpo

	Género	Mujer / Hombre 5 años
	Altura	3'6"
	Peso	10,3 kg
	Color de ojos	
	Color de pelo	
	Tono de piel	
	Talla de ropa	5-6 años
	Tamaño del zapato	Reino Unido 10



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias esculpidas anatómicamente correctas
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos automáticos)
- Adecuado para la aplicación de DEA
- Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)
- Inserción intraósea en tibia y fémur



MANIQUÍ INFANTIL AVANZADO

Ofrezca a los alumnos la mejor preparación posible para responder a emergencias pediátricas de la vida real con un maniquí infantil avanzado sorprendentemente realista.

Las capacidades clínicas incluyen ALS, intubación y ventilación.

Este maniquí está fabricado con siliconas de grado protésico para recrear la sensación de diferentes tejidos. Se pesa con precisión con extremidades parcialmente articuladas, para una experiencia lo más cercana posible a la realidad de un bebé.

Características del cuerpo

	Género	Hembra / Macho 10 meses
	Altura	2'3"
	Peso	Aprox. 7 kg
	Color de ojos	  
	Color de pelo	 
	Tono de piel	  
	Talla de ropa	9-12 meses



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias esculpidas anatómicamente correctas
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto manual como mecánicamente
- La caja torácica soporta compresiones torácicas manuales, RCP
- El cordón umbilical es desmontable con vasos para acceso vascular (20cm)
- Marco esquelético integrado simulado



MANIQUÍ PREMATURO (28 SEMANAS)

Proporcione a los alumnos la mejor preparación para responder a emergencias de la vida real utilizando el maniquí realista de 28 semanas para prematuros.

Anatómicamente correcto y ponderado con precisión, este maniquí hiperrealista está diseñado para brindar una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Fabricado con siliconas de platino de grado protésico, este maniquí pediátrico reproduce el aspecto y la sensación de diferentes tejidos e incluye párpados medio cerrados que se pueden abrir manualmente, además de piel lavable a prueba de salpicaduras. Las capacidades clínicas incluyen intubación y ventilación.

Características del cuerpo

	Género	Mujer / Hombre 28 semanas pretérmino
	Altura	30 centímetros
	Peso	2 libras
	Tono de piel	



Entrenador de tareas intraóseas



Embalaje para heridas en el hombro

Entrenador de tareas

MANIQUÍ VACIADO SIN VIDA

Los SIMBODIES Lifeless Blasted son una variación de nuestros maniqués originales, diseñados y fabricados a mano para reproducir las partes del cuerpo quemadas y quemadas de una persona fallecida en 7-18 partes diferentes.

Los maniqués SIMBODIES Lifeless Blasted se utilizan más comúnmente para replicar cuerpos de escenarios de bombardeo. Es importante tener en cuenta que estos maniqués están destinados a replicar cuerpos fallecidos, lo que significa que cuentan con capacidades limitadas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Genitales masculinos o femeninos
- Bocas cerradas
- Capacidades limitadas, simulando cadáveres

Características del cuerpo adulto

- Género **Mujer 20-30**
- Altura **Mujer 5'7"**
- Tono de piel

Características del cuerpo Niño

- Sexo **Femenino / Masculino**
- Altura **4'2"**
- Tono de piel

Características del cuerpo infantil

- Sexo **Femenino / Masculino**
- Altura **2'3"**
- Tono de piel

MANIQUÍ QUEMADO SIN VIDA

SIMBODIES Lifeless Burnt (adulto y niño) son una variación de nuestros maniqués originales, diseñados y fabricados a mano para reproducir las partes del cuerpo quemadas y quemadas de una persona fallecida.

Los maniqués SIMBODIES sin vida quemados se utilizan más comúnmente para replicar cuerpos de víctimas de quemaduras graves y son ideales para su uso en la investigación de la escena del crimen y con fines de identificación.

Estos maniqués están destinados a replicar cuerpos fallecidos: no cuentan con capacidades clínicas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Genitales masculinos o femeninos
- Bocas cerradas
- Capacidades limitadas, simulando cadáveres

Características del cuerpo adulto

- Género **Mujer 20-30**
- Altura **Mujer 5'7"**
- Peso **Aprox. 32kg**

Características del cuerpo Niño

- Sexo **Femenino / Masculino**
- Altura **4'2"**
- Peso **Aprox. 15kg**

Características del cuerpo infantil

- Sexo **Femenino / Masculino**
- Altura **2'3"**
- Peso **Aprox. 7 kg**

Tenga en cuenta: los productos sin vida no se suministran con la ropa. Sería una decisión del cliente agregar ropa para respaldar los requisitos de capacitación.

MANIQUÍ MÉDICO SIMBODIES EQUIPOS COMPATIBLES

Esta página detalla los kits que se suministran con algunos modelos de maniquí: el nombre del kit corresponde al maniquí con el que se suministra.

Los kits adicionales se pueden comprar por separado.

VÍA AÉREA QUIRÚRGICA AVANZADA KIT DE REPARACIÓN DE MANIQUÍ

(Suministrado con el maniquí avanzado para vía aérea quirúrgica SIMBODIES)

- Mangas de cuello de simulación lisas
- Mangas de cuello de simulación de quemaduras
- Mangas de cuello de simulación de corte de cuchillo
- Mangas de cuello de simulación de herida de bala
- 60 paneles de espuma reemplazables de un solo uso (amarillo)
- 1 sangre pegajosa A 100ml

KIT DE PIEL DE REPARACIÓN BÁSICA QUE INCLUYE:

- 1 juego de silicona A & B 100ml
- 10 toallitas con alcohol
- 1 paquete de 60 toallitas
- 1 film transparente
- 10 botes de papel para mezclar
- 2 espátulas para mezclar

KIT DE REPARACIÓN DE TORACOTOMÍA

KIT DE REPARACIÓN DE TORACOTOMÍA

(Suministrado con SIMBODIES Pro Thoracotomy Trainer)

- 20 insertos de esternón de repuesto
- 8 bolsas de pericardio de repuesto
- 3 diseños de cofre reparables
- 20 tiras intercostales
- 1 set de siliconas A&B tono piel claro 1000ml
- 1 set silicona A&B color organo 400ml
- 1 set de siliconas A&B grasa color 400ml
- 1 simulación de aceite de sangre 500ml
- Concentrado de sangre 1 piso 500ml
- 1 líquido limpiador 250ml
- 1 paquete de 60 toallitas
- 1 esponja de limpieza amarilla
- 1 spray activador de color 250ml
- 2 jeringas de 60ml
- 1 film transparente
- 1 hilo tono piel claro
- 1 hilo rosa pálido
- 1 hilo amarillo
- 1 hilo rojo
- 8 conectores de repuesto
- 50 botes de papel para mezclar
- 20 espátulas de madera
- 6 espátulas transparentes para mezclar
- 2 espátulas planas blancas
- 1 sudor y lágrimas 100ml



PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PREVISTOS DE UN VISTAZO

SIMBODIES ofrece los maniqués médicos más realistas disponibles para simulación médica. Si bien proporcionarán una experiencia de simulación inmersiva, pueden tener limitaciones basadas en la intervención médica técnica específica que se practique.

Procedimiento médico	Adulto		Pediátrico			Niño	Pre término	Sin vida				*Comentarios	
	Estándar	Pro avanzado	Avanzado Niño (9-10 años)	Estándar Niño (9-10 años)	Avanzado Niño (5-6 años)			Quemado Adulto	Quemado Niño	Adulto Explosión	Niño Explosión		
Hemorragia catastrófica o potencialmente mortal													
Aplicación de un torniquete	✓	✓	✓	✓	✓								
Embalaje de heridas	✓	✓	✓	✓	✓								
Sangrado de la unión	✓	✓	✓	✓	✓								
Gestión de las vías respiratorias													
Examen de las vías respiratorias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Inclinación de cabeza		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Elevación del mentón		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Fuerza de mandíbula		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Succión de vía aérea*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Se puede realizar y simular; sin embargo, evite verter cualquier tipo de líquido en la boca y vía aérea	
Gestión postural de las vías respiratorias*		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.	
Inserción de vía aérea nasofaríngea*		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.	
Inserción de vía aérea orofaríngea*		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.	
Inserción de un dispositivo supraglótico para las vías respiratorias*		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Los diferentes dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias tendrán diversos grados de realismo en términos de inserción y ventilación, según el dispositivo utilizado. Póngase en contacto para obtener más información.	
Laringoscopia/Intubación traqueal		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.	
Empaquetadura maxilofacial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Control de columna C													
Aplicación de un collarín espinal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Aplicación de estabilización manual en línea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Evaluación de la respiración													
Ventilación Artificial (MVB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓					La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las vías respiratorias y los dispositivos de ventilación utilizados.	
Ventilación Artificial (Ventilador cuando está intubado)		✓	✓	✓	✓	✓	✓					La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las vías respiratorias y los dispositivos de ventilación utilizados.	
Aplicación de Sello de Pecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Es posible que algunos sellos de pecho no se adhieran a la piel de silicona de la misma manera que la piel humana.	
Toracocentesis con aguja		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Niño/bebé y mujer adulta 2.º intercostal únicamente. Adulto Macho 2do y 5to.	
Evaluación de la circulación													
Aplicación de varios aderezos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Aplicación de ligante pélvico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Aplicación de dispositivo de tracción (femoral)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Tibia de acceso Intraoseo		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Cabeza humeral de acceso Intraoseo		✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Compresiones torácicas (manuales)*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					Las compresiones torácicas se pueden realizar en todos nuestros maniqués, pero no están diseñadas únicamente para la formación en RCP. La profundidad y la respuesta de las compresiones torácicas varían según el maniquí.	
Compresiones torácicas (automatizadas)*		✓	✓	✓	✓	✓	✓					Ciertos dispositivos funcionarán. Póngase en contacto para obtener información.	
Aplicación de electrodos de desfibrilador de entrenamiento/DEA*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Es posible que algunas almohadillas no se peguen.


PERSONALIZACIONES DE UN VISTAZO

Procedimiento médico	Adulto			Pediátrico			Niño	Prematuro	Sin vida				
	Avanzado	Estándar	Pro	Avanzado Niño(9-10 años)	Estándar Niño (9-10 años)		Avanzado Niño (5-6 años)	Avanzado Niño	28 semanas antes término	Adulto quemado	niño quemado	Explosión de adultos	Explosión infantil
Catastrófico/ amenazante para la vida Hemorragia	✓		✓	✓									
Amputación en brazo y mano incluyendo tubos de sangrado	✓												
Amputación en la pierna incluyendo tubos de sangrado	✓			✓									
Función del catéter	✓												
Drenaje torácico	✓		✓										
Función de identificación permanente (Tatuaje/Marcas de nacimiento)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Cápsulas IO de cabeza humeral	✓			✓			✓	✓					
Cápsulas IO de tibia proximal de repuesto	✓			✓			✓	✓					



SIMBODIES ENTRENADORES MANIQUÍ



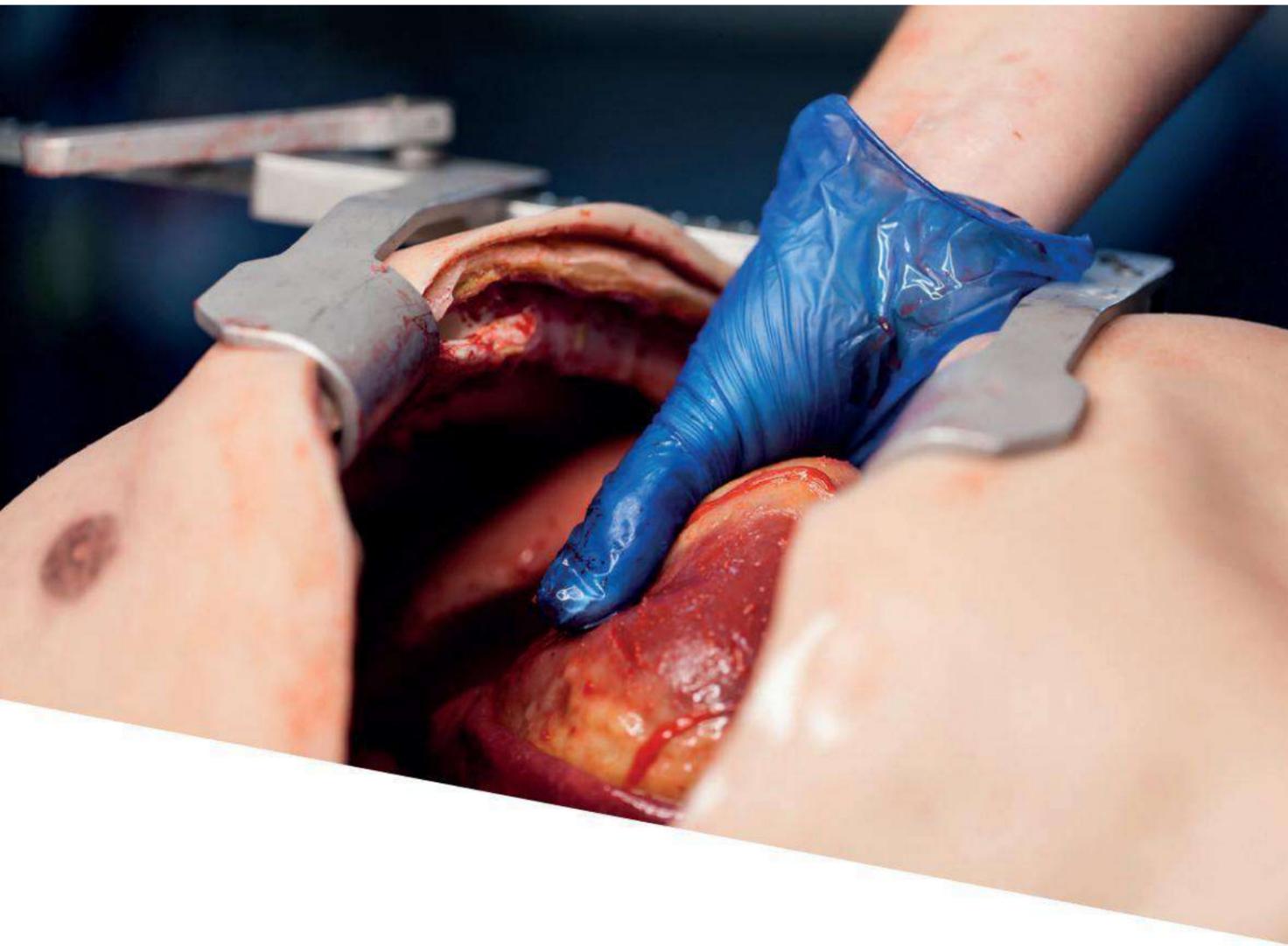

ENTRENADOR DE MEDIO CUERPO PRO TORACOTOMÍA

Elija una opción inmersiva con nuestro entrenador de maniquí biofidelico operable y reparable de medio cuerpo. Utilice este equipo adaptable, portátil y realista para brindar capacitación quirúrgica en una variedad de entornos de capacitación de emergencia.

El entrenador tiene algunas piezas reemplazables y se puede reparar con el equipo suministrado, y hay disponibles kits de recarga, por lo que los procedimientos se pueden realizar con repetición ilimitada en el mismo entrenador.

Características del cuerpo

	Género	Hombre adulto 30-40 años
	Peso	48.5 libras
	Color de ojos	
	Tono de piel	

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- La piel exterior y la grasa se pueden suturar juntas
- Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado con precisión
- Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual como mecánica
- La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales (RCP) (no apto para dispositivos automáticos)
- Segmento de esternón recortable y reemplazable
- Descompresión con aguja en los sitios intercostales segundo y quinto
- Toracostomía bilateral de los dedos (solo en el quinto sitio intercostal)
- Inserción de drenaje torácico (solo en el quinto sitio intercostal)
- Sistema vascular anatómico realista de silicona que incluye corazón, pulmones y aorta
- Bomba de aire manual para simular un gasto cardíaco
- La bomba de sangre manual suministra sangre al corazón y a una herida permanente en el ventrículo izquierdo (bomba suministrado)
- Manejo de hemorragias y reparación de una herida en la pared del corazón: se pueden usar suturas y grapas.
- Incisión del pericardio para liberar el taponamiento cardíaco
- Sitios intraóseos (IO) llenos de sangre
- La infusión intraósea (IO) en la cabeza humeral y la tibia puede ser impulsada por impacto o potencia en la medula ósea simulada.

REPARABLE, REEMPLAZABLE, REPETIBLE

El entrenador de toracotomía Pro tiene muchas características reparables y reemplazables. Cada uno se suministra con un kit completo de materiales y equipos, para ayudar a mantenerlo en buen estado y permitir que los procedimientos se realicen una y otra vez.

- Piel del tórax reparable y reemplazable con tejido graso integrado (se suministran 3)
- Área suave y pegajosa para adherir la piel del tórax de reemplazo en su lugar
- Tejido del quinto espacio intercostal reemplazable (se suministran 20)
- Inserto de esternón reemplazable en el quinto espacio intercostal (se suministran 20)
- Saco de pericardio reparable y reemplazable con nervios frénicos (se suministran 8)

* *Párpados cerrados capaces de abrirse manualmente*



HABILIDADES MÉDICAS DE EMERGENCIA ENTRENADOR DE TORSO (ENTRENADOR EMS-T)

El Entrenador de Torso de Habilidades Médicas de Emergencia (EMS-TT) ha sido diseñado como un dispositivo de entrenamiento clínico avanzado de mesa para enseñar una variedad de habilidades que incluyen Manejo de las vías respiratorias,

Compresiones torácicas, inserción IO y procedimientos quirúrgicos de las vías respiratorias en un entrenador de habilidades de maniquí realista. .

Hecho a mano con silicona de platino de grado protésico segura para la piel. Este entrenador de habilidades de maniquí anatómicamente correcto y realista tiene una vía aérea extraída de un cadáver para crear un entrenamiento realista para practicar el tratamiento de emergencia de las vías respiratorias. Incluyendo la capacitación en procedimientos quirúrgicos de vía aérea, compresiones torácicas e inserción IO en cabezas humerales bilaterales, este entrenador de mesa tiene una amplia gama de funciones médicas y se puede utilizar en cualquier salón de clases, escenario o evento de capacitación médica.

*Tenga en cuenta: Se recomienda utilizar nuestro fluido de sudor y lágrimas como lubricante al colocar los tubos en la nariz y la boca. Es absorbido por la silicona y no deja residuos. * Párpados cerrados con capacidad de apertura manual.*

Características del cuerpo

	Género	Hombre adulto 30-40 años
	Peso	62 libras
	Color de ojos	
	Tono de piel	

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Vía aérea capaz de intubación y ventilación
- Capacidad de vía aérea quirúrgica
- Fosas nasales
- (NUEVO) Infusión intraósea (IO) en las cabezas humerales
- Descompresión con aguja: segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular (frente)
- Drenajes torácicos: 5º espacio intercostal en la línea axilar anterior
- (NUEVO) Ligero y viene en estuche portátil
- Hecho a mano en el Reino Unido
- Silicona de platino de grado protésico, segura para la piel

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PREVISTOS EN UN VISTAZO PARA LOS ENTRENADORES MANIQUÍ

Procedimiento médico	Entrenador de medio cuerpo Pro Thoracotomy	Habilidades médicas de emergencia: entrenador de torso	*Comentarios
Gestión de las vías respiratorias			
Examen de las vías respiratorias	✓	✓	
Inclinación de cabeza	✓	✓	
Elevación del mentón	✓	✓	
Fuerza de mandíbula	✓	✓	
Succión de vía aérea*	✓	✓	Se puede realizar y simular; sin embargo, evite verter cualquier tipo de líquido en la boca y las vías respiratorias.
Gestión postural de las vías respiratorias*	✓	✓	Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.
Inserción de vía aérea nasofaríngea*	✓	✓	Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.
Inserción de vía aérea orofaríngea*	✓	✓	Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.
Inserción de un dispositivo supraglótico para las vías respiratorias*	✓	✓	Los diferentes dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias tendrán diversos grados de realismo en términos de inserción y ventilación, según el dispositivo utilizado. Póngase en contacto para obtener más información.
Laringoscopia/ Intubación traqueal*	✓	✓	Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.
Cricotiroidotomía percutánea con aguja*	✓	✓	Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.
Vía aérea quirúrgica	✓	✓	
Empaquetamiento maxilofacial	✓	✓	
Embalaje nasal	✓	✓	
Control de columna C			
Aplicación de un collarín espinal	✓	✓	
Evaluación de la respiración			
Examen de torax	✓	✓	
Ventilación Artificial (MVB)*	✓	✓	La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las vías respiratorias y los dispositivos de ventilación utilizados.
Ventilación Artificial (Ventilador cuando está intubado)*	✓	✓	La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las vías respiratorias y los dispositivos de ventilación utilizados.
Aplicación de Sello de Pecho*	✓	✓	Es posible que algunos sellos de pecho no se adhieran a la piel de silicona de la misma manera que la piel humana.
Descompresión torácica con aguja*	✓	✓	2do y 5to espacio intercostal.
Toracostomía de dedo*	✓	✓	(Pasos parciales) NO vierta líquidos en el espacio pulmonar. SÓLO se simula la succión.
Inserción de drenaje torácico intercostal*	✓	✓	(Pasos parciales) NO vierta líquidos en el espacio pulmonar. SÓLO se simula la succión.
Evaluación de la circulación			
Inserción de aguja intraósea (cabeza humeral)*	✓	✓	Bilateral.
Inserción de aguja intraósea (esternón)	✓	✓	
Compresiones torácicas (manuales)*	✓	✓	Las compresiones torácicas se pueden realizar en todos nuestros maniqués, pero no están diseñadas únicamente para el entrenamiento en RCP. La profundidad y la respuesta de las compresiones torácicas varían según el maniquí.
Compresiones torácicas (automatizadas)*	✓	✓	Ciertos dispositivos funcionarán. Póngase en contacto para obtener información.
Aplicación de almohadillas para desfibrilador/DEA*	✓	✓	Es posible que algunas almohadillas no se adhieran a la piel de silicona de la misma manera que la piel humana. Se recomiendan los Desfibriladores de entrenamiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede dar una descarga con un desfibrilador?

Se recomienda utilizar todos los SIMBODIES solo con un desfibrilador de entrenamiento; tenga cuidado de seguir los procedimientos de seguridad adecuados.

• ¿Dónde se fabrican los SIMBODIES?

Todos los maniqués SIMBODIES están hechos a mano por nuestro talentoso equipo en Thirsk, una hermosa ciudad en la zona rural de North Yorkshire, Reino Unido.

• ¿Qué tamaño de NPA se puede utilizar?

Macho adulto: talla 7-8

Hembra adulta: talla 6-7

Niño: talla 6

Infante: Sin pasaje nasal

• ¿Se pueden colocar los maniqués SIMBODIES sentados en posición vertical en los vehículos?

Si bien no se recomienda, todos los maniqués para adultos y niños (aparte del entrenador de toracotomía profesional) pueden sentarse en vehículos con cierta dificultad. Todos los maniqués volverán a caer de forma natural a la posición horizontal si se dejan sin apoyo.

• ¿Son flexibles las articulaciones y las extremidades SIMBODIES?

Todos los maniqués tienen una flexibilidad limitada debido a que están contruidos alrededor de una estructura de acero.

Este marco facilita varios niveles de articulación para el posicionamiento del paciente.

• ¿Dónde se pueden almacenar?

Antes de guardar SIMBODIES, limpie toda la suciedad, el maquillaje y el maquillaje con agua jabonosa caliente o toallitas limpiadoras. Deje secar y aplique Manikin Setting Powder de su kit de mantenimiento.

Envuelva su maniquí en una sábana de algodón limpia (proporcionamos una con cada maniquí) y colóquelo horizontalmente, boca arriba, protegido de su entorno en una bolsa o caja para cadáveres.

Recomendamos almacenar SIMBODIES a temperatura ambiente promedio.

SIMBODIES ofrece los maniqués médicos más realistas disponibles para simulación médica. Si bien proporcionarán una experiencia de simulación inmersiva, pueden tener limitaciones basadas en la intervención médica técnica específica que se practique.

• ¿Cómo se limpian los tubos y los SIMBODIES?

Limpie la suciedad, el maquillaje y el maquillaje con agua jabonosa caliente o toallitas limpiadoras. Deje secar y aplique Manikin Setting Powder de su kit de mantenimiento. Limpie los tubos de sangrado con una jeringa de agua tibia o alcohol isopropílico para eliminar los residuos de los tubos hasta que salgan transparentes. Asegúrese de tener almohadillas o pañuelos absorbentes para absorber los residuos restantes y seque los SIMBODIES.

• ¿Cuánto duran los SIMBODIES?

Si se usa correctamente y se cuida adecuadamente, los SIMBODIES duran años. Póngase en contacto para obtener más información sobre el mantenimiento de maniqués y conocer nuestros paquetes de servicios.

• ¿Cómo puedo reparar SIMBODIES?

Algunos modelos SIMBODIES (Entrenador Pro Toracotomía y Maniquí Avanzado de Vías Aéreas Quirúrgicas) son reparables y se suministran con kits para que los procedimientos se puedan repetir una y otra vez.

Para reparaciones más extensas y reparaciones a otros modelos, comuníquese con nosotros para conocer nuestros paquetes de servicio.

• ¿Los SIMBODIES tienen venas para la inserción de agujas?

SIMBODIES no tiene venas de trabajo. Nuestras fundas de canulación se pueden comprar por separado y son compatibles para su uso tanto en maniqués SIMBODIES como en personas que actúan como pacientes de simulación.

Consulte nuestro catálogo Sim Essentials para el entrenador de canulación IV.

• ¿Se pueden especificar SIMBODIES para satisfacer necesidades específicas?

Hay opciones de personalización limitadas disponibles, comuníquese con el equipo para hablar sobre sus requisitos.

PART OF SAFEGUARD MEDICAL



(+51) 452-3328 / 986 295 776



contacto@warem.pe



Av. Parque de Las Leyendas 210 - Of. 1001 San Miguel, Lima - Perú